





01 LIGAR / AUTO

Para começar a usar, aperte o botão ligar, isso fará com que o produto inicie no modelo automático, com tempo de funcionamento padrão de 30 minutos.

MODO AUTOMÁTICO

O modo automático o aparelho vibrará por um minuto e mudará de massagem.

São 05 tipos diferentes de massagem e sua identificação é através de uma lâmpada LED do lado direito, acesa.

MODO MANUAL


Para acessar os diferentes tipos de massagem, acione o botão central. ①

O LED direito se apagará e pode-se escolher entre 05 tipos diferentes de massagem. Ao apertar 05 vezes, o aparelho retorna para o modo automático.

02 CALOR

O controle tem duas intensidades para o aquecimento, sendo morno e quente. quando pressionado o botão calor, que está ao lado esquerdo do controle, o LED piscará, informando que entrou no primeiro nível de aquecimento «morno».

Mais um toque e o LED ficará aceso, informando que o aquecimento está no máximo «quente». Mais um toque e o aquecimento se desliga. O tempo máximo de funcionamento é de 30 minutos, após isso ele se auto desligará.

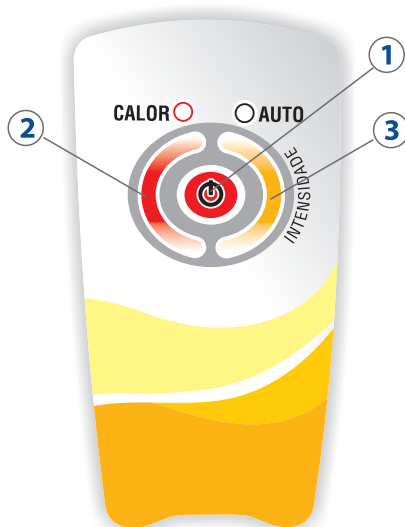

03 INTENSIDADE

A intensidade de vibração se inicia no mínimo. São 03 níveis de intensidade, que quando pressionada aumenta. Ao chegar ao máximo ela diminui com um novo toque, iniciando um novo ciclo.

VIBRAÇÃO

Conheça detalhadamente cada uma das 05 funções de vibração:

- 01 Vibração constante;
- 02 Vibração oscila de 01 em 01 segundo;
- 03 Vibração oscila de 1/2 em 1/2 segundo, dando a sensação de formigamento;
- 04 Vibração oscila de 1/2 em 1/2 segundo, e no final se mantém por 01 segundo;
- 05 Vibração oscila do lado direito para o esquerdo por 1/2 segundo e vibra constantemente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



tecido sintético
Aerado Spacer

fechamento com velcro.
Adapta perfeitamente
ao usuário.

- ✓ Melhora a articulação
- ✓ Alivia dores musculares
- ✓ Auxilia a fadiga muscular
- ✓ Alivia as dores nos pés
- ✓ Diminui o inchaço
- ✓ Promove o relaxamento

CERTIFICADO DE GARANTIA

INTRANSFERÍVEL

Nos termos e condições abaixo, de propriedade do Sr(a) _____

está garantido por 12 meses contra possíveis erros de fabricação.

Condições de Garantia

Apresentando qualquer avaria V.sa. deverá entrar em contato imediato com a empresa para que seu aparelho seja revisado, obedecendo os seguintes critérios:

1. Dentro do período de vigência de garantia, quando a avaria se der por defeito de fabricação, a revisão é gratuita.

2. Nos casos de avaria por descuido ou uso incorreto, será feita a revisão do aparelho avariado mediante pré-orçamento das peças para conserto, mesmo estando com a garantia vigente.

3. Ocorrendo a avaria após a vigência da garantia, V.sa. terá direito a revisão do aparelho mediante o pagamento da taxa tratada no item "2" acima.

4. Em caso de rompimento do lacre a presente garantia se torna sem efeito.

Data: _____ de _____ de _____.

QUANDO NÃO HOUVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SUA CIDADE,
O NOSSO MEIO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO SERÁ
ENCOMENDA NORMAL PELOS CORREIOS.

Baixe o APP para ler o QR Code e aproxime a câmera do seu celular para acessar diretamente a página de registro.



GANHE MAIS 6 MESES DE GARANTIA!

Registrando seu produto em nosso site, você ganha mais 6 meses de garantia. Acesse www.rainoah.com.br e registre o código de seu produto.

 rainoahbemestar

 @rainoahbemestar



(Versão 03/23)