

www.rainoah.com.br

Reflex[®]

Bota Massageadora


Rainoah

Reflex®

Bota Massageadora

Introdução

Antes de tudo, agradecemos por adquirir a bota massageadora Reflex. Após muitas pesquisas, notamos que muitas pessoas se queixam sobre problemas de circulação e neste manual você terá informações relevantes que ajudarão a compreender o funcionamento da Bota reflex.

Uma grande parcela da população brasileira sofre de problemas de circulação nos membros inferiores, o público feminino especificamente acima dos 50 anos, é o mais acometido, sendo os sintomas listados abaixo;

- Pele fria e seca
- Coceira
- Inchaço nos pés e tornozelos
- Dormência
- Câimbras

Nossos estudos mapearam as necessidades dessa população, desenvolvemos então a Bota Reflex, um produto prático, fácil de usar e muito relaxante. Sua massagem através de bolsas de ar, comprimem com certa "força" a musculatura das pernas, panturrilhas e planta dos pés, trazendo um relaxamento ao usuário. Os benefícios para as pessoas que utilizam o produto relatam os seguintes benefícios;

- Elimina as dores corporais
- Diminui o cansaço na pernas
- Melhora a circulação sanguínea
- Gera uma sensação de bem estar.

Com uma massagem forte e prazerosa temos certeza que irá lhe surpreender nos primeiros instantes de uso.

Especificações

A Bota Reflex, foi desenvolvida atendendo especificações de organismos nacionais e internacionais, como CE, ROHS e Inmetro. Sua construção foi pensada para proporcionar facilidade no uso, sensores internos de segurança analisam a pressão exercida, não deixando pressionar demasiadamente ou comedido a perna do usuário.



01 Bolsa de Transporte

02 botas massageadoras

01 manual de instruções



01 Controlador Manual

01 Fonte de Alimentação bivolt



02 mangueiras de conexão

02 bifurcadores "Y" de conexão



Composição

Sua construção consiste em uma bomba de ar de alta pressão, solenoides blindados e um software inteligente que mapeia os pontos dos membros, enviando a pressão exata para trazer o alívio a pernas e pés dos usuários.



Especificações

- Controlador Bivolt 110 / 220V
- Botas 40x30cm
- Material das botas:



Partes do produto

- 01 Bolsa de transporte;
- 01 Par de Botas Reflex;
- 01 Controlador;
- 02 Mangueiras longas;
- 02 Conectores "Y"
- 04 Mangueiras curtas;
- 01 Manual de Instrução;





Ações e Benefícios

- Massagem relaxante
- Redução de Inchaços
- Auxilia na circulação
- Alivia dores
- Promove Bem Estar
- Fácil higienização
- Uso diário

Indicações

- Elimina as dores corporais
- Diminui o cansaço na pernas
- Melhora a circulação sanguínea
- Gera uma sensação de bem estar.


Preparação

1.




Sente-se ou deite-se em um sofá, cadeira ou cama, ou qualquer lugar que se sinta confortável.

2.

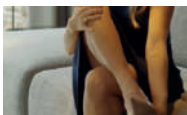

Retire meias, faixas, calças ou qualquer vestimenta que atrapalhe a utilização do produto.

3.

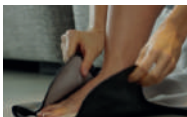


Vista as botas nos dois pés, ou solicite ajuda. Pressione o velcro, mas não deixe muito pressionado, lembrando que quanto mais pressionado o velcro estiver, maior será pressão que a produto exercera na pele.

4.



Conecte as duas mangueiras na parte posterior em cada bota.

5.

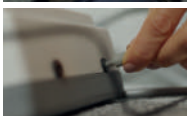

Conecte as mangueira na parte posterior da central de comando.

6.



Insira a fonte de alimentação na parte lateral do aparelho, no ponto de conexão.

Utilização

1. Ligando o produto

Para ligar o produto é só apertar o botão liga|desliga, aguarde 10s, que o sistema começará a inflar.

2. Ajustando a Intensidade

Faz com que o motor infla mais rápido, dando mais pressão. Indo de 01 a 04.

3. São 04 tipos de massagem disponíveis:

Modo 01 – pé + panturrilha Modo automático Todas as funções durarão 02 e 30 segundos minutos em cada totalizando 30 minutos de massagem, totalizando 03 ciclos completos;

Modo 02 – panturrilha – a bolsa de ar infla durante 20s e segura inflado durante 10s esvazia com 10 segundos;

Modo 03 – pé - a bolsa de ar infla durante 20s e segura inflado durante 10s esvazia com 10 segundos;

Modo 04 – panturrilha piscando – - a bolsa de ar infla durante 20s de lado A, logo após simultaneamente esvazia e inicia inflar o lado B por 20 segundos, a sensação é de maior pressão. Após a conclusão, esvazia as bolsas por 10s, reiniciando o processo.

Modo 05 – pé piscando - A bolsa de ar infla o lado A e deixa desligado o lado B, por iniciando o lado B depois passando para o lado A.

Todas as funções a bota fica 10s, sem inflar, como medida de segurança.

Recomendações

- Antes de usar, leia atentamente o manual
Insira o plug de energia.
- Após utiliza-lo retire a fonte de alimentação da tomada.
- Não utilizar por pessoas que esteja com feridas ou úlceras nas pernas ou pés.
- Não utilize em locais úmidos, com banheiros ou saunas.
- Não pule ou pise no aparelho, em seu interior contém uma bolsa plástica que se furada perde sua eficácia, que é inflar.

- Não pule ou pise no aparelho, em seu interior contém uma bolsa plástica que se furada perde sua eficácia, que é inflar.
- Nunca abra ou viole o tecido do aparelho, caso isso aconteça, o produto perde sua garantia.
- Qualquer duvida, entre em contato com nosso SAC.
- Como primeiro uso, aconselhamos que use com a pressão inicial baixa, nas sessões posteriores.
- Conheça bem o produto antes.

Limpeza

- Desligue da tomada antes de limpar.
- Não use pano úmido para limpeza, apenas seco. Caso a central de comando esteja engordurado, utilize uma quantidade mínima de álcool 70 em um pano.
- Não utilize produtos de limpeza fortes ou abrasivos, pois podem danificar.
- Para limpar a bota, utilize pano seco. Caso esteja com odor, utilize álcool 70 em um pano semi úmido.
- Depois de utilizado, guarde na bolsa original, que acompanha o produto.

Cuidados Operacionais

- A cada utilização, respeite o tempo de 30 minutos de espera (desligado)
- Nunca utilize o paralho por mais de duas horas consecutivas, sem o intervalo de 30 min.



ACESSE A PÁGINA DA BOTA REFLEX

Aponte sua câmera do celular ou baixe um leitor de QR Code, para acessar diretamente a página do produto.

<http://www.rainoah.com.br/botareflex.html>



CERTIFICADO DE GARANTIA

(Intransferível)

Nos termos e condições abaixo, o Massageador Térmico Vibratório, de propriedade do Sr(a) _____, está garantido por 12 meses contra possíveis erros de fabricação.

Condições de Garantia

Apresentando qualquer avaria V.sa. deverá entrar em contato imediato com a empresa para que seu aparelho seja revisado, obedecendo os seguintes critérios:

1. Dentro do período de vigência de garantia, quando a avaria se der por defeito de fabricação, a revisão é gratuita.
2. Nos casos de avaria por descuido ou uso incorreto, será feita a revisão do aparelho avariado mediante o pagamento de uma taxa de 30% (trinta por cento) do preço atual, mesmo vigência da presente garantia.
3. Ocorrendo a avaria após a vigência da garantia, V.sa. terá direito a revisão do aparelho mediante o pagamento da taxa tratada no item "2" acima.

Data: _____ de _____ de _____

QUANDO NÃO HOUVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SUA CIDADE, ACESSE O NOSSO SITE, CLIQUE EM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. LÁ VOCÊ ENCONTRARÁ OS PROCEDIMENTOS CORRETOS PARA ASSISTÊNCIA.

GANHE MAIS 6 MESES DE GARANTIA!

Registrando seu produto em nosso site, você ganha mais 6 meses de garantia. Acesse www.rainoah.com.br e registre o código de seu produto.



Fale Conosco!
(43) 9 9837-8597



*Acesse nosso site e nos siga
nas redes sociais*



@Rainoahbemestar