



Manual de Instrução

Comfort



/rainoahbemestar





Introdução

Nada como aliviar as dores e desconfortos musculares do nosso corpo de uma forma muito eficiente, não é?

O **Massageador Comfort** é o seu aliado para relaxamento e bem-estar. Com design versátil e disponível em três cores (rosa, azul e cinza), este produto é perfeito para uso em casa ou no trabalho.

Imagine poder desfrutar de uma massagem relaxante após um dia estressante!

Especificações

Composição: Desenvolvida em espuma D26, com tecido Air Mash Ultra ventilado, elástico Ultra resistente e velcro 100% poliéster

Especificações: Produto Bivolt, tecido 100% poliéster 120g/m², sistema eletrônico de massagem, duas resistências blindadas, 02 cápsulas de vibração de 4800 RPM

Partes do produto: 01 caixa de transporte, 01 fonte de alimentação 12v 2A, manual de instrução e garantia online



Medidas: 400 x 200 x 300 mm

Peso: 1,00 kgs

Potência: 50w com calor e 15w sem calor

Garantia: 12 meses

Partes do Produto

O tecido é supermacio e resistente ao aquecimento na área central. O teclado interno também é uma adição conveniente para personalizar as configurações de massagem e aquecimento.

Certamente, isso proporcionará um alívio eficaz para cólicas menstruais e dores abdominais.



Benefícios

- Promove relaxamento muscular
- Aumenta a circulação sanguínea
- Material resistente
- Fácil higienização
- Fácil armazenamento
- Reduz os efeitos das cólicas menstruais
- Reduz o inchaço e a retenção de líquidos



Comfort



Indicações

- Alívio de cólicas menstruais
- Redução de dores abdominais e lombares
- Melhora do fluxo sanguíneo
- Elimina dores corporais



Utilização

Lombar, abdômen, glúteo, ombros, pernas e cabeça.

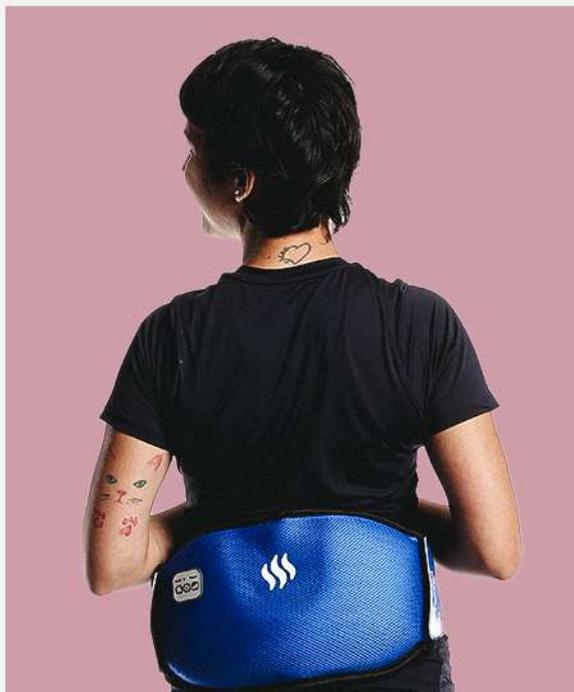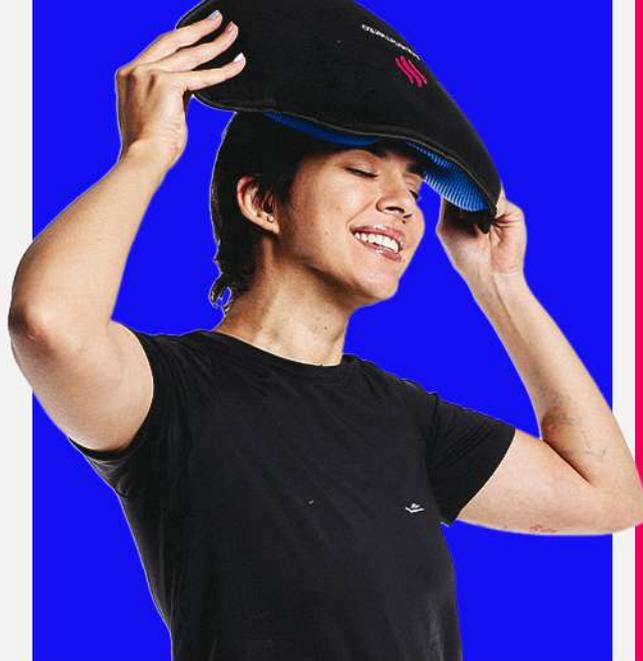

Recomendações

- Antes de usar, leia atentamente este manual
- Após utilizar, retire a fonte da tomada
- Não utilize por pessoas que estejam com feridas ou úlceras no corpo
- Não utilize em locais úmidos, como banheiros e saunas
- Não suba no aparelho, isso pode danificar o produto
- Não abra o produto
- Diabéticos use sempre sem calor



Limpeza

- Desligue o aparelho antes de higienizar
- Utilizar sempre um pano seco, caso seja necessário utilize álcool 70

Cuidados Operacionais

- A cada utilização, respeite o tempo de 30 minutos de espera
- Não usar por mais de 30 minutos seguidos
- Evitar uso em temperaturas muito quentes por mais de 8 minutos seguidos



Registre seu produto

Aponte a câmera do seu celular para acessar diretamente a página para registrar seu produto e ganhar mais 6 meses de garantia adicional.

Acesse também o link da página do produto pelo endereço abaixo.

<https://rainoah.com.br/registre-seu-produto.html>



Certificado de Garantia

Nos termos e condições abaixo, o Massageador Comfort está garantido por 12 meses contra defeitos de fabricação.

Condições de Garantia

Apresentando qualquer avaria, deverá entrar em contato imediato com a empresa para que seu aparelho seja revisado, obedecendo os seguintes critérios:

1. Dentro do período de vigência de garantia, quando a avaria se der por defeito de fabricação, a revisão é gratuita.
2. Nos casos de avaria por descuido ou uso incorreto, será feita a revisão do aparelho avariado mediante o pagamento de uma taxa de 30% (trinta por cento) do preço atual, mesmo vigência da presente garantia.
3. Ocorrendo a avaria após a vigência da garantia, V.sa. terá direito a revisão do aparelho mediante o pagamento da taxa tratada no item "2" acima.

QUANDO NÃO HOUVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SUA CIDADE, ACESSE O NOSSO SITE, CLIQUE EM SUPORTE E ASSISTENCIA TÉCNICA. LÁ VOCÊ ENCONTRARÁ OS PROCEDIMENTOS CORRETOS PARA ASSISTÊNCIA.



Obrigada pela compra!

Comfort



/rainoahbemestar

