

MANUAL MESSAGEADOR ABDOMINAL



CINTA MASSAGEADORA SLIMMING BELT

O Massageador Slimming Belt alinhado à tecnologia de aquecimento é uma faixa massagedora em que você pode confiar o seu corpo a benefícios extraordinários de relaxamento muscular e corporal. Design ergonômico, fácil de manusear e guardar, possui controle digital, tecnologia SMD e timer, cinco tipos de massagem, com três níveis de intensidade, resistência com aquecimento duplo e blindado, aquecendo até 42°C, contém sensores de temperatura que garantem a sua segurança. Seu processo de fabricação acompanha sistema de alongamento, o que possibilita seu uso em pessoas com variados tamanhos de abdômen e quadril.

Para uso profissional em clínicas de estética ou para o consumidor final que quer agregar mais qualidade de vida ao seu dia-a-dia.

O poder de relaxar os seus músculos nas palmas das suas mãos!

AÇÕES E BENEFÍCIOS

- ▶ Promove relaxamento muscular
- ▶ Auxilia na circulação sanguínea
- ▶ Auxilia sistema linfático
- ▶ Auxilia na nutrição e oxigenação celular
- ▶ Contribui no tratamento da celulite
- ▶ Contribui no tratamento gordura localizada e flacidez
- ▶ Material resistente
- ▶ Fácil armazenamento

INDICAÇÕES

- ▶ Ajuda a combater celulite e flacidez
- ▶ Ativa a circulação sanguínea
- ▶ Ajuda no combate a gordura localizada
- ▶ Massagens relaxantes e terapêuticas
- ▶ Ativa o sistema linfático
- ▶ Diminui o inchaço
- ▶ Modela a silhueta



Tamanho: Altura: 4 cm x 18 cm x 120 cm
Composição: Tecido tipo corvin, espuma D28, quatro motores, controle remoto com plástico ABS
Cor: Verde, Vermelho, Azul marinho e Pink
Potência: 25 w com calor ou 15 w sem calor
Peso: 1,1 kgs
Bivolt
01 ano de garantia


POSIÇÕES DE USO




COSTAS



ABDÔMEN

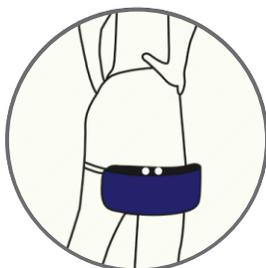


**COXAS E
PANTURRILHAS**

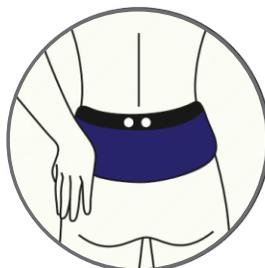

LOMBAR



QUADRIL

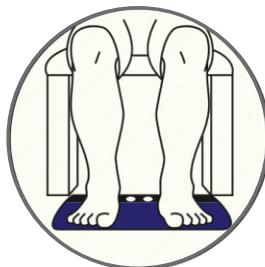

**EMBAIXO
DOS PÉS**

MASSAGEADOR VIBROTERÁPICO DIGITAL

O massageador térmico vibroterápico, também é conhecido como almofada vibratória. É um massageador clássico, utilizado por várias famílias nas últimas décadas.

Seu formato retangular possibilita ser usado nas seguintes regiões do corpo: costa, pernas, planta dos pés, abdômen, panturrilhas e a face. É sabido que ficar muito tempo sentado ou em pé prejudica a circulação sanguínea dos pés e das pernas, provocando inchaços e desconfortos, e a falta de uma circulação eficaz, provoca vários males em nosso organismo.

Seu controle digital, desempenha 05 tipos diferentes de massagens, sendo você o responsável por escolher qual tipo e intensidade. Seu timer é programado em 30 minutos. Sua função térmica varia entre as temperaturas 37°C e 41°C, o que relaxa diretamente toda musculatura em contato, toda plastificada, pode ser higienizada com álcool 70, é produto para ser usada em toda a família, desde crianças até idosos.

AÇÕES E BENEFÍCIOS

- ▶ Promove relaxamento muscular
- ▶ Auxilia na circulação sanguínea
- ▶ Auxilia sistema linfático
- ▶ Auxilia na nutrição e oxigenação celular
- ▶ Material resistente
- ▶ Fácil armazenamento
- ▶ Fácil higienização

INDICAÇÕES

- ▶ Ajuda a combater celulite e flacidez
- ▶ Ativa a circulação sanguínea
- ▶ Massagens relaxantes e terapêuticas
- ▶ Ativa o sistema linfático
- ▶ Diminui o inchaço
- ▶ Reduz o cansaço e o stress



UTILIZE-O TAMBÉM COMO BOLSA DE ÁGUA QUENTE QUANDO ACIONADO A FUNÇÃO TÉRMICA

DADOS TÉCNICOS

Tamanho: Altura: 10 cm x 33 cm x 49 cm
Composição: Tecido tipo corvin, plastificado, espuma D20, dois motores, controle remoto com plástico ABS, duas resistências de aquecimento
Cor: branco
Potência: 25 w com calor ou 15 w sem calor
Peso: 1,1 kgs
Bivolt
01 ano de garantia

POSIÇÕES DE USO



COXAS

QUENTE

Sessões de 10 a 30 min.
2 a 4 vezes ao dia
Intensidade de 4 a 7 (Adultos)



COSTAS

QUENTE

Sessões de 10 a 20 min.
1 a 3 vezes ao dia
Intensidade de 4 a 7 (Adultos)



BRAÇOS

QUENTE

Sessões de 5 a 20 min.
1 a 3 vezes ao dia
Intensidade de 4 a 7 (Adultos)



ABDÔMEN

QUENTE

Sessões de 10 a 20 min.
2 a 3 vezes ao dia
Intensidade de 4 a 7 (Adultos)



PANTURRILHAS

QUENTE

Sessões de 10 a 20 min.
2 a 3 vezes ao dia
Intensidade de 4 a 7 (Adultos)



NUCA

QUENTE

Sessões de 5 minutos aproximadamente
na parte que se deseja tratar.
Quantas vezes forem necessárias.



EMBAIXO DOS PÉS

QUENTE

Sessões de 10 a 15 min.
2 a 3 vezes ao dia
Intensidade de 4 a 7 (Adultos)



LATERAL DA COXA

QUENTE

Sessões de 20 min.
2 a 4 vezes ao dia
Intensidade de 4 a 7 (Adultos)



FACE

QUENTE

Sessões de 20 minutos
3 vezes ao dia
Intensidade de 1 a 3 (Adultos)

CINTA MASSAGEADORA SF

O Massageador SF destaca-se por sua praticidade. Faixa massageadora com design moderno e com controle de fácil utilização alterna seu uso em quente ou frio, adequando a temperatura de acordo às necessidades da sua musculatura. Contém sistema inteligente de atuação, após 30 minutos de uso desliga-se automaticamente, o que facilita o seu uso diário sem se preocupar.

Com 05 tipos de massagens diferentes, emite ondas que ativam o processo celular, melhorando a elasticidade da pele, potencializando a redução de medidas e a drenagem corporal, o que define melhor as regiões do corpo.

Promove uma massagem confortável, resultando em relaxamento nas costas, abdômen, coxas, panturrilhas e quadril. Acompanhe a redução de medidas que acontece naturalmente ao utilizar o produto com o exclusivo sistema de medidas que varia entre 60 cm a 120 cm da faixa e saiba as suas conquistas do dia-a-dia.

AÇÕES E BENEFÍCIOS

- ▶ Massagem relaxante
- ▶ Drenagem
- ▶ Auxilia na redução de medidas
- ▶ Penetra e estimula os músculos internos
- ▶ Regulador de temperatura
- ▶ Fácil higienização
- ▶ Uso diário

INDICAÇÕES

- ▶ Ajuda a combater flacidez
- ▶ Ajuda no combate a gordura localizada
- ▶ Massagens relaxantes
- ▶ Diminui o inchaço
- ▶ Modela a silhueta



CONTROLE

1 - LIGAR/AUTO

Para começar a usar, aperte o botão ligar, isso fará com que o produto inicie no modelo automático, com tempo de funcionamento padrão de 30 minutos.

MODO AUTOMÁTICO


O modo automático a cinta vibrará por um minuto e mudará de massagem.

São 05 tipos diferentes de massagem e sua identificação é através de uma lâmpada LED do lado direito, acesa.

MODO MANUAL

Para acessar os diferentes tipos de massagem, acione o botão central. ①

O LED direito se apagará e pode-se escolher entre 05 tipos diferentes de massagem. Ao apertar 05 vezes, a cinta retorna para o modo automático.

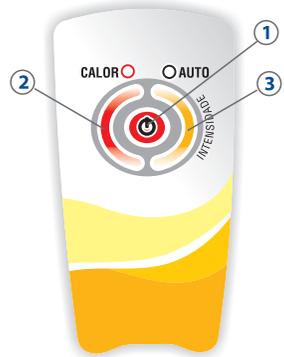

2 - CALOR

O controle tem duas intensidades para o aquecimento, sendo morno e quente. Quando pressionado o botão calor, que está ao lado esquerdo do controle, o LED piscará, informando que entrou no primeiro nível de aquecimento «morno».

Mais um toque e o LED ficará aceso, informando que o aquecimento está no máximo «quente». Mais um toque e o aquecimento se desliga. O tempo máximo de

funcionamento é de 30 minutos, após isso ele se auto desligará.

3 - INTENSIDADE

A intensidade de vibração se inicia no mínimo. São 03 níveis de intensidade, que quando pressionada aumenta. Ao chegar ao máximo ela diminui com um novo toque, iniciando um novo ciclo.

VIBRAÇÃO

Conheça detalhadamente cada uma das 05 funções de vibração:

01 Vibração constante;

02 Vibração oscila de 01 em 01 segundo;

03 Vibração oscila de 1/2 em 1/2 segundo, dando a sensação de formigamento;

04 Vibração oscila de 1/2 em 1/2 segundo, e no final se mantém por 01 segundo;

05 Vibração oscila do lado direito para o esquerdo por 1/2 segundo e vibra constantemente.

CERTIFICADO DE GARANTIA INTRANSFERÍVEL

Nos termos e condições abaixo, de propriedade do Sr(a) _____

está garantido por 12 meses contra possíveis erros de fabricação.

Condições de Garantia

Apresentando qualquer avaria V.sa. deverá entrar em contato imediato com a empresa para que seu aparelho seja revisado, obedecendo os seguintes critérios:

1. Dentro do período de vigência de garantia, quando a avaria se der por defeito de fabricação, a revisão é gratuita.
2. Nos casos de avaria por descuido ou uso incorreto, será feita a revisão do aparelho avariado mediante pré-orçamento das peças para conserto, mesmo estando com a garantia vigente.
3. Ocorrendo a avaria após a vigência da garantia, V.sa. terá direito a revisão do aparelho mediante a um pré-orçamento, conforme tratado no item "2" acima.
4. Em caso de rompimento do lacre a presente garantia se torna sem efeito.
5. Quando não houver Assistência Técnica em sua cidade, o nosso meio de comunicação e atendimento será encomenda normal pelos correios.

Data: _____ de _____ de _____ .

RECOMENDAÇÕES

- ▶ Antes de usar o produto, leia atentamente o manual.
- ▶ Não permita o uso por crianças.
- ▶ É proibida a utilização em banheiros ou em locais que estejam molhados.
- ▶ Não guarde o produto na presença de calor ou inflamáveis.
- ▶ Não pule sobre o produto, pois poderá prejudicar seus mecanismos.
- ▶ Nunca abra ou viole o tecido ou zíper do produto, caso isso aconteça perde-se a assistência de fábrica.
- ▶ O desligamento só é total quando o aparelho é retirado da tomada.
- ▶ Diabéticos devem utilizá-lo sem Calor.
- ▶ Não use pano úmido para a limpeza, apenas seco. Caso o controle esteja engordurado, utilize uma mínima de álcool em um pano.
- ▶ Não utilize substâncias abrasivas.
- ▶ Caso haja algum problema com o produto, o usuário não deve tentar consertar o aparelho. Por favor entre em contato com o nosso departamento de assistência técnica.



Baixe o APP para ler o QR Code e aproxime a câmera do seu celular para acessar diretamente a página de registro.

GANHE MAIS 6 MESES DE GARANTIA!

Registrando seu produto em nosso site, você ganha mais 6 meses de garantia. Acesse www.rainoah.com.br e registre o código de seu produto.

f rainoahbemestar

@rainoahbemestar

