



ACESSE A PÁGINA
DO PRODUTO



Rainoah

POWERFLEX PRO



Rainoah

POWERFLEX PRO

ALÍVIO MUSCULAR PROFUNDO COM POTÊNCIA E PRECISÃO

A **Rainoah PowerFlex Pro** foi desenvolvida para quem busca recuperação muscular, relaxamento e desempenho máximo. Com motor de alta performance e quatro cabeças intercambiáveis, ela proporciona massagem percussiva intensa, aliviando dores, rigidez e fadiga muscular. Ideal para uso pessoal, academias, fisioterapeutas, esteticistas e esportistas que exigem resultados rápidos e eficazes.



Valide sua garantia!

DESTAQUES DO PRODUTO

- Motor silencioso e de alto torque
- 6 níveis de intensidade ajustáveis
- 4 cabeças de massagem para diferentes grupos musculares
- Design ergonômico e leve
- Bateria recarregável via USB-C
- Até 6 horas de autonomia
- Uso portátil e sem fio
- Desligamento automático em 15 minutos

FUNÇÕES E MODOS DE USO

- Massagem de Percussão: alívio imediato de tensões musculares.
- Recuperação Pós-Treino: reduz fadiga e melhora a performance.
- Relaxamento Diário: estimula circulação e libera pontos de tensão.
- Uso Profissional: ideal para fisioterapeutas, esportistas e massoterapeutas.

INSTRUÇÕES DE USO

- Escolha a cabeça de massagem adequada e encaixe firmemente.
- Pressione e segure o botão Power por 3 segundos para ligar.
- O aparelho iniciará no nível 1 de intensidade.
- Pressione novamente o botão para alternar entre os 5 níveis de potência.
- Aplique na área desejada, movimentando lentamente, sem exercer pressão excessiva.
- Para desligar, pressione o botão Power por 3 segundos.
- Utilize a intensidade mais baixa para aquecimento muscular e aumente gradualmente conforme sua necessidade.

CARREGAMENTO

- Conecte o cabo USB-C ao adaptador 5 V.
- O LED indicará o carregamento piscando e permanecerá aceso quando completo.
- Tempo de carga: Aproximadamente 3 horas.
- Autonomia: até 6 horas (primeira carga obrigatória).
- Desconecte após carga total.

AVISOS DE SEGURANÇA

Não utilizar em casos de:

- Lesões abertas, inflamações ou áreas com dor intensa;
- Gravidez, doenças cardíacas ou uso de marca-passo;
- Após refeições ou durante o sono.
- Não utilize sobre ossos, cabeça ou rosto.
- Não mergulhe o aparelho em água.
- Não aplique pressão excessiva.
- Produto indicado para uso doméstico.

GUIA DE CABEÇAS DE MASSAGEM



PLANA

Em todas as partes do corpo.



CILÍNDRICA

Articulações e pontos de acupuntura.



EM U

Regiões ao redor do pescoço, ombros e coluna.



ESFÉRICA

Grandes grupos musculares.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Pistola Massageadora PowerFlex Pro
- 04 Cabeças de massagem
- 01 Cabo USB-C
- 01 Manual de instruções

CUIDADOS E LIMPEZA

- Limpe com pano seco e macio.
- Não utilize produtos químicos, álcool ou abrasivos.
- Guarde em local seco e protegido da luz solar.
- Se não for usar por longos períodos, recarregue a cada 3 meses.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARÂMETRO


Alimentação
Níveis de intensidade
Tempo de carregamento
Autonomia Média
Material
Cabeças Inclusas
Ruído
Peso

DESCRIÇÃO:

USB-C
5
3 horas
6 horas
ABS + liga metálica
4
< 45 dB
900 g (aprox.)

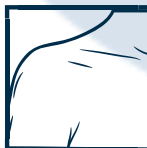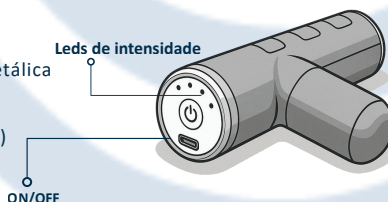

OMBROS

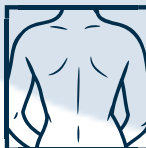

COSTAS



BICEPS



QUADRÍCEPS E
PANTURRILHA



PÉS