



ACESSE A PÁGINA  
DO PRODUTO



*Rainoah*

MASSAGEADOR COMFORT GO



## MASSAGEADOR COMFORT GO

ALÍVIO PROFUNDO COM MASSAGEM E CALOR INTELIGENTE

O **Massageador Comfort GO** foi desenvolvido para oferecer alívio articular, relaxamento muscular e conforto térmico controlado. Combinando vibração, compressão e aquecimento inteligente, ele atua de forma terapêutica sobre joelhos, cotovelos e ombros, proporcionando uma experiência completa de bem-estar em poucos minutos.



Valide sua garantia!

## DESTAQUES DO PRODUTO

- Massagem por vibração.
- Aquecimento inteligente com até 45°.
- 3 níveis de vibração e 5 níveis de temperatura.
- Design ergonômico e ajustável para diferentes articulações.
- Display digital com comandos independentes.
- Bateria recarregável de longa duração.
- Desligamento automático em 30 minutos.
- Uso seguro e portátil.

## FUNÇÕES E MODOS DE USO

- Função de aquecimento: promove relaxamento profundo e melhora da circulação.
- Função de vibração: estimula os músculos e alivia tensões.
- Função combinada: une vibração e calor para resultados otimizados.
- Controle independente: permite ajustar intensidade e temperatura separadamente.
- Display digital: indica temperatura e modo ativo em tempo real.

## ANTES DO PRIMEIRO USO E CARREGAMENTO

- Verifique se o produto está carregado, e recarregue antes do uso.
- O visor indica bateria fraca com o símbolo “Lo”.
- Recarregue antes de continuar o uso.

## INSTRUÇÕES DE USO

- Fixe o aparelho ao redor do joelho (ou cotovelo/ombro) utilizando as tiras ajustáveis.
- Pressione o botão liga/desliga por 2 segundos até ouvir o sinal sonoro.
- Ajuste a temperatura com os botões + (aumentar) e — (diminuir):

Nível 1: 45 ° — AMENO  
Nível 2: 50 ° — ABAFADO  
Nível 3: 55 ° — MORNHO  
Nível 4: 60 ° — QUENTE  
Nível 5: 65 ° — TÓRRIDO

- Ajuste a vibração com os botões correspondentes:

Modo 1: vibração suave

Modo 2: vibração média

Modo 3: vibração intensa

- Para bloquear ou desbloquear o painel, pressione brevemente o botão de energia.
- O produto desliga automaticamente após 30 minutos.

## CARREGAMENTO

- Conecte o cabo USB 5 V ao adaptador e depois à entrada do massageador.
- O LED pisca durante o carregamento e permanece aceso quando completo.
- Tempo médio de carga: aproximadamente 3 horas.
- Não utilize o produto enquanto estiver carregando.

## CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

Não utilizar em casos de:

- Doenças cardiovasculares, trombose ou inflamações nas articulações;
- Uso de marca-passo ou dispositivos eletrônicos implantados;
- Gravidez, febre, tumores malignos ou feridas abertas;
- Pós-operatório recente ou pele sensível.
- Diabéticos devem utilizar sem aquecimento.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Massageador Comfort GO
- 01 Cabo USB de carregamento
- 01 Manual de instruções

## CUIDADOS E LIMPEZA

- Limpe com pano seco e macio.
- Não utilize solventes ou produtos abrasivos.
- Evite contato com água.
- Guarde longe de calor, umidade e luz solar direta.
- Carregue a cada 2 meses se ficar longos períodos sem uso.
- Atenção: diabéticos não devem usar o produto diretamente sobre a pele.
- Proibido o uso durante o sono.


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### PARÂMETRO

Funções  
Níveis de Temperatura  
Níveis de Vibração  
Bateria  
Tempo de uso  
Potência Nominal  
Entrada de carregamento  
Peso  
Áreas de Uso

### DESCRIÇÃO:

Aquecimento + Vibração  
5  
3  
1200 mAh (lítio recarregável)  
30 minutos  
7 W  
5 V  
Aprox. 600 g  
Joelho, cotovelo e ombro

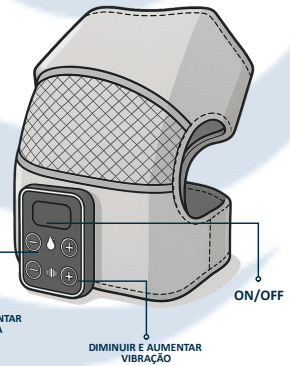

JOELHOS



OMBROS



COTOVELO