



ACESSE A PÁGINA
DO PRODUTO



Rainoah

POWERFLEX GO



POWERFLEX GO

POTÊNCIA E RELAXAMENTO NA PALMA DA SUA MÃO

A **Rainoah PowerFlex Go** foi criada para quem busca recuperação muscular, bem-estar e performance com praticidade.

Compacta, silenciosa e potente, ela oferece massagem de percussão profunda que ajuda a aliviar tensões, estimular a circulação e acelerar a recuperação pós-treino. Ideal para uso pessoal, profissionais de estética, fisioterapia e atletas.



Valide sua garantia!

DESTAQUES DO PRODUTO

- Motor silencioso e de alto desempenho
- Design compacto e ergonômico
- 4 cabeças de massagem intercambiáveis
- Bateria recarregável via USB-C
- 5 níveis de intensidade ajustáveis
- Até 6 horas de autonomia
- Peso leve, ideal para transporte
- Uso seguro e confortável em qualquer região do corpo.

FUNÇÕES E MODOS DE USO

- Alívio muscular profundo: reduz rigidez e fadiga após atividades físicas.
- Recuperação esportiva: melhora a oxigenação e a circulação sanguínea.
- Relaxamento corporal: alivia tensões e promove bem-estar geral.
- Uso direcionado: com diferentes cabeças, atua em regiões específicas do corpo.

INSTRUÇÕES DE USO

- Escolha a cabeça de massagem adequada e encaixe firmemente no orifício de acoplamento.
- Pressione e segure o botão Power por 2 segundos para ligar.
- Selecione o nível de intensidade pressionando o botão novamente (1 a 4).
- Segure pelo cabo e aplique suavemente sobre a área desejada, sem exercer pressão excessiva.
- Para desligar, mantenha pressionado o botão Power por 2 segundos.
- Recomenda-se não aplicar massagem por mais de 60 segundos consecutivos na mesma área.

CARREGAMENTO

- Conecte o cabo USB-C ao adaptador 5 V.
- O LED indicará o carregamento piscando e permanecerá aceso quando completo.
- Tempo de carga: 3 a 4 horas (primeira carga obrigatória).
- Autonomia: até 6 horas (uso contínuo em baixa velocidade).
- Desconecte após carga total.

AVISOS DE SEGURANÇA

Não utilizar em casos de:

- Lesões abertas, inflamações ou áreas com dor intensa;
- Gravidez, doenças cardíacas ou uso de marca-passo;
- Após refeições ou durante o sono.
- Não utilize sobre ossos, cabeça ou rosto.
- Não mergulhe o aparelho em água.
- Não aplique pressão excessiva.
- Produto indicado para uso doméstico.

GUIA DE CABEÇAS DE MASSAGEM



EM U

Regiões ao redor da coluna, pescoço e ombros



PLANA

Uso geral em todas as partes do corpo



ESFÉRICA

Grandes grupos musculares



CILÍNDRICA

Articulações e pontos de acupuntura

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Pistola Massageadora Mini PowerFlex Go
- 04 Cabeças de massagem
- 01 Cabo USB-C para carregamento
- 01 Manual de instruções

CUIDADOS E LIMPEZA

- Limpe com pano seco e macio.
- Não utilize produtos químicos, álcool ou abrasivos.
- Guarde em local seco e protegido da luz solar.
- Se não for usar por longos períodos, recarregue a cada 3 meses.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARÂMETRO


Alimentação
Níveis de intensidade
Tempo de carregamento
Autonomia Média
Material
Cabeças Inclusas
Ruído
Peso

DESCRIÇÃO:

USB-C 5V
4
3–4 horas
6 horas
ABS + alumínio
4
< 45 dB
480 g (aprox.)

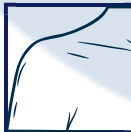

OMBROS

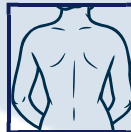

COSTAS



BICEPS



QUADRÍCEPS E
PANTURRILHA



PÉS